

レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッター



レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッター

追従性を高めた新デザイン

ORDERING INFORMATION

	製品番号	JANコード
レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッター 100cm (ブレード径 2.0-6.0 mm)	1005-00	4571191912794
レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッター 40cm (ブレード径 2.0-6.0 mm)	1006-00*	4571191912800

* 印の製品は受注発注品です。詳細はお問い合わせ下さい。

仕様

センターリングフープ の最大直径	ブレードの最大直径	ブレードハウジング の外径	保護シースの外径	有効長
9.5 mm	6.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	100 cm 40 cm

この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしにかわることがございます。詳細は担当営業にご確認ください。

【性能・使用目的・効能・効果】

・本品は大腿動脈血栓症におけるバイパス移植術(in situ バイパス法)において、
伏在静脈の静脈弁を切開するために使用する

【禁忌・禁止】

・再使用禁止、再滅菌禁止
・「ステンレス鋼」および「ポリテトラフルオロエチレン」での過敏症を有する患者への使用禁止

販売名：レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッター
製造販売承認番号：22600BZX00388000

 LeMaitre®

LeMaitre is a registered trademark and Your Peripheral Vision is a trademark of LeMaitre Vascular, Inc. ©2021 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved.
Patents-see www.lemaitre-vascular-patents. Printed in the USA. M0279 Rev. E 02/21 JP LEV2 07/21

LeMaitre Vascular, Inc.
63 Second Avenue
Burlington, MA 01803
USA

T 781 221 2266
F 781 221 2223

LeMaitre Vascular ULC
9135 Keele Street, Suite B6
Vaughan ON L4K 0J4
Canada

T 905 832 8077
F 905 303 3903

LeMaitre Vascular GmbH
Otto-Volger-Str. 5a/b
65843 Sulzbach/Ts.
Germany

T +49 (0)6196 659230
F +49 (0)6196 527072

LeMaitre Vascular Pte.Ltd.
138 Robinson Road
#12-02 Oxley Tower
Singapore

T +65 6932 2691

レメイト・バスキュラー合同会社
〒102-0082
東京都千代田区一番町16-1
共同ビル1F

Tel. 03-5215-5681
Fax.03-5215-5682
<https://lemaitre-japan.co.jp/>

米国本社URL
<https://www.lemaitre.com/>

 LeMaitre®

0.035インチ
ガイドワイヤーに
適合

レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッター

追従性を高めた新デザイン

レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッターは最適な静脈弁切除のためのセルフサイジング、セルフセンタリングフープにより、創傷壊死を低減させ、患者の早期回復を助ける画期的な製品です。

レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッターは、親水性コーティング 0.035インチガイドワイヤーとともに使用することにより以下のような特徴があります。

- 追従性を高めます。
- アクセスは一度で済ませることが可能です。
- 遠位伏在静脈へのより簡単な挿入を可能にします。
- 手技のスピードアップを可能にし、使いやすさが向上します。
- 目的外の箇所へのデバイス進入リスクを最小限に抑えます。

2.0-6.0 mmの幅広いブレードレンジ

レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッターは、ブレードレンジが2.0-6.0mmと幅広く、複数サイズのデバイスの用意の必要がなく、最適な静脈弁切除術を可能にします。

セルフサイジング、セルフセンタリングのフープ

自動的に静脈の内径に適合し、最適な静脈弁切除術を可能にします。

イリゲーションポート 滅菌生理食塩液等の注入を可能とするポートを備えています。

追従性の強化

新デザインの静脈弁カッターは親水性コーティング 0.035インチガイドワイヤーとともに使用することで追従性が高められます。


挿入時損傷の回避 ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製シーースを用いることにより、ブレードを閉じたままデバイスを挿入し、スムーズに前進させることを可能にしています。

レメイト オーバーザワイヤー 静脈弁カッターの使用方法



ステップ1

親水性コーティング 0.035インチガイドワイヤーを用い伏在静脈内の近位吻合部を超え処置領域を通過させた状態で保持してください。ブレードを収納した状態で弁カッターを、ガイドワイヤーに沿わせ、伏在静脈の処置領域（吻合部の遠位側2.0から3.0cm程度）まで進めます。ブレード部分は切除目的の静脈弁を通過させた位置に停止させます。

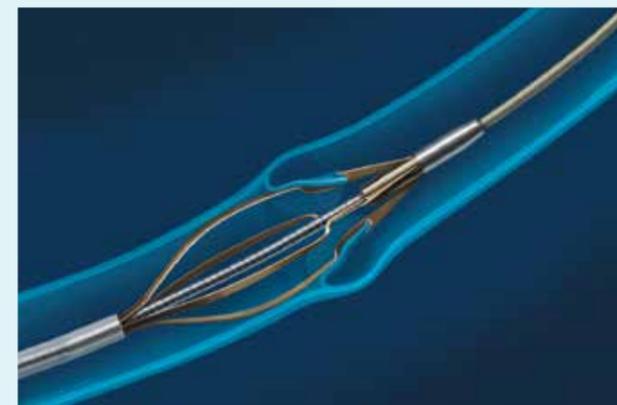

ステップ2

ガイドワイヤーを保持しつつ、伏在静脈内の弁カッターのブレードを開き、ゆっくりと引いていきます。ガイドワイヤーによって高められた追従性と、セルフサイジング、セルフセンタリングフープにより自動的に静脈の内径に適合し、最適な状態で弁を切開します。



ステップ3

伏在静脈の外にグリーンの安全マーカーが現れたら、弁カッターのブレードを収納し、抜去してください。グリーン安全マーカーは、保護シーースの末端からおよそ4.75cm 遠位側についています。