




プルト F3[®]-S カロチッド・シャント

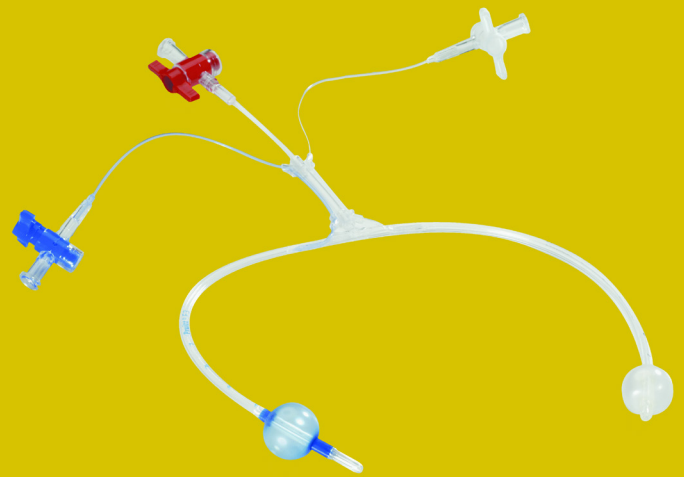

レメイトのカロチッドシャント製品に新しい製品が加わりました。
総頸動脈側のインフレーションルーメン、バルーンおよび深度マーカを青色にして識別を
容易にしました。

チューブ部分とバルーンはポリウレタンです。



※本品には過膨張防止用の圧調整用バルーン及びセーフティスリーブは付いておりません。

ORDERING INFORMATION

	直径	長さ	製品番号	JANコード
プルト・F3-S・アウトライン・カロチッド・シャント				
アウトラインシャント (T-ポート付)	8F	31 cm	2015-10	4571191913173
アウトラインシャント (T-ポート付)	9F	31 cm	2014-10	4571191913166
プルト・F3-S・インライン・カロチッド・シャント				
インラインシャント (T-ポート付)	9F	15 cm	2014-12*	4571191913180

*印の製品は受注発注品です。詳細はお問い合わせ下さい。

この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしに変わることがございます。詳細は担当営業にご確認ください。

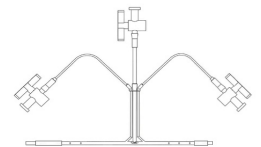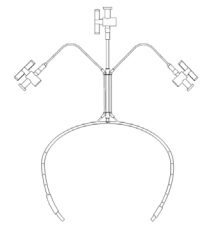

【警告】

- ・ 空気やガスでバルーンを膨張させないこと。[空気塞栓の恐れがある為]
- ・ バルーンの膨張は推奨最大容量を超えないこと。[バルーンの破裂、カテーテルの破損、血管損傷の恐れがある為]
- ・ 血管内でカテーテルを移動させる時は、バルーンを収縮させてからゆっくりと行うこと。血管内でのカテーテルの操作は慎重に行い、操作中に少しでも抵抗を感じた場合は、操作を中断し、過度な力を加えずにバルーンを収縮させた状態でカテーテルの前進/引き抜きを行うこと。[バルーンの破裂、カテーテルの破損、血管損傷の恐れがある為]

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止、再滅菌禁止

販売名：プルト F3-S カロチッドシャント
医療機器承認番号：22900BZX00171000

レメイト・バスキュラー合同会社

〒102-0074

東京都千代田区九段南2-9-4

久保寺ツインタワービル1F

Tel. 03-5215-5681

Fax.03-5215-5682



LeMaitre, Pruitt F3 and Your Peripheral Vision are registered trademarks of LeMaitre Vascular, Inc.
©2016 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved. M0001 Rev.P 06/16, JP 07/17, Lev2 01/18

