

オーダーインフォメーション

プット オクルージョン & パフュージョン カテーテル

	バルーン長	バルーン直径	シャフト	有効長	製品番号	JANコード
プット アオルティック・オクルージョン・カテーテル		43 mm	12F	24 cm	2100-12J	4571191913708
プット イリゲーション オクルージョン・カテーテル		18 mm	9F	23 cm	2102-09	4571191912862
プット スモール オクルージョン・カテーテル		7 mm	3F	27 cm	2103-36	4571191912831
		9 mm	4F	27 cm	2103-46	4571191912848
		11 mm	5F	27 cm	2103-56	4571191912855
ディスタル パフュージョン・カテーテル	1.5 cm	18 mm	12F	24 cm	2105-15J	4571191913692

この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしに変わることがございます。詳細は担当営業にご確認ください。

プット アオルティック・オクルージョン・カテーテル

特定保険医療材料機能区分
血管内手術用カテーテル オクリュージョンカテーテル 特殊型
販売名：血管閉塞用カテーテル
医療機器承認番号：20800BZY00236000

プット イリゲーション オクルージョン・カテーテル

特定保険医療材料機能区分
血管内手術用カテーテル オクリュージョンカテーテル 標準型
販売名：レメイト イリゲーション・オクルージョンカテーテル
医療機器認証番号：22600BZX00001000

プット スモール オクルージョン・カテーテル

特定保険医療材料機能区分
血管内手術用カテーテル オクリュージョンカテーテル 標準型
販売名：レメイト スモールオクルージョンカテーテル
医療機器認証番号：22500BZX00098000

ディスタル パフュージョン・カテーテル

特定保険医療材料機能区分
血管内手術用カテーテル オクリュージョンカテーテル 標準型
販売名：レメイト ディスタルパフュージョンカテーテル
医療機器認証番号：22600BZX00156000



LeMaitre is a registered trademark and Pruitt is a registered trademark (US) of LeMaitre Vascular, Inc.
©2025 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved. Printed in the USA. M0006 Rev. L 04/25 , JP Rev.A 07/25

レメイト・バスキュラー合同会社
〒102-0082
東京都千代田区一番町16-1
共同ビル一番町1F

T +81 (0)3-5215-5681
F +81 (0)3-5215-5682

LeMaitre Vascular, Inc.
63 Second Avenue
Burlington, MA 01803
USA

T +1 781 221 2266
F +1 781 221 2223

LeMaitre Vascular GmbH
Otto-Volger-Str. 5a/b
65843 Sulzbach/Ts.
Germany

T +49 6196 659230
F +49 6196 527072

LeMaitre Pte. Ltd.
138 Robinson Road
#12-02 Oxley Tower
068906
Singapore

T +65 6813 0281




<https://lemaitre-japan.co.jp/>



プット オクルージョンカテーテル & パフュージョンカテーテル

血管閉塞を安全かつ確実に

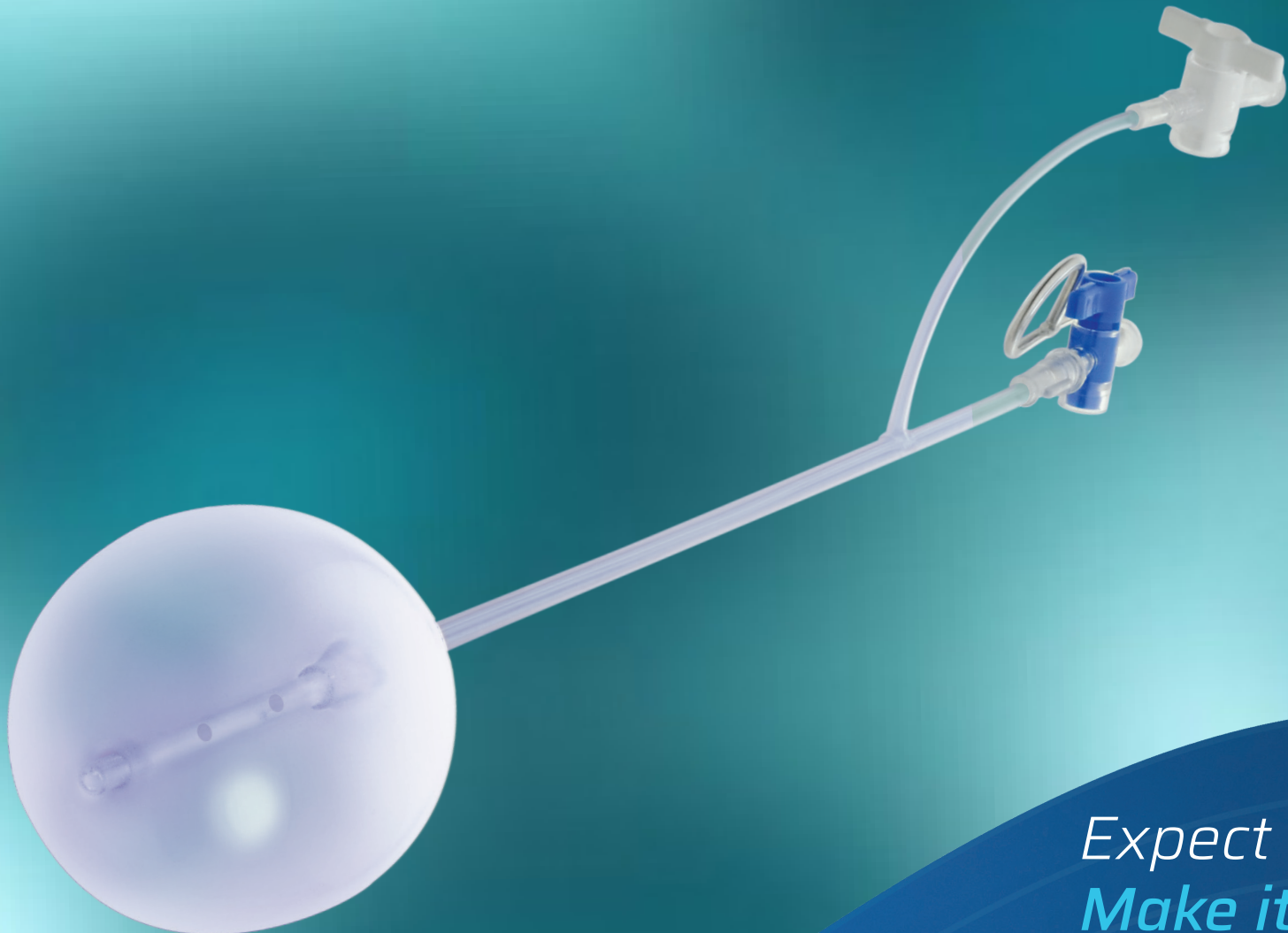

Expect Reliability
Make it LeMaitre®

プルット オクルージョン & パフュージョン カテーテル

安全且つ有効な血流遮断

レメイト・バスキュラーは、安全かつ速やかな血流遮断を幅広い血管に適用できるオクルージョン・カテーテル及びパフュージョンカテーテル製品群を提供いたします。

プルット アオルティック・オクルージョン・カテーテル
プルット イリゲーション オクルージョン・カテーテル
プルット スモール オクルージョン・カテーテル
ディスタル パフュージョン・カテーテル

* Data on file at LeMaitre Vascular, Inc.

プルット アオルティック・オクルージョン・カテーテル

破裂性もしくは血液が漏出している腹部大動脈瘤の血流遮断を、最大容量50ccのバルーンで確実に行えます。このカテーテルは、解離やクロスクランプをかけるのが困難な場合、動脈瘤に到達するのに時間を要する場合、大動脈が石灰化しクランプをかけるのに適さない場合等に用います。

屈曲可能なスタイレットにより挿入が容易
大動脈の血流にも耐えうる脱落防止設計
スタイレットとストップコックの付いた灌流用ルーメンは、灌流を行ない、逆流を防ぎます。

プルット イリゲーション オクルージョン・カテーテル

腸骨動脈、大腿動脈、膝窩動脈等の血管に使用できるよう設計されており、本カテーテルにより効果的な血管内腔の閉塞や灌流が行えます。

灌流用ルーメンを持つデュアル・ルーメン カテーテル
へパリン、造影剤または血栓溶解剤等の注入が可能

ディスタル パフュージョン・カテーテル

ディスタルパフュージョン・カテーテルは胸腹部大動脈瘤や腹部大動脈瘤の手術中に内臓動脈への末梢灌流を行うのに最適です。体外循環回路に接続し、バルーン側を患者の血管に挿入します。

高流量ルーメンにより下記の流量を実現:**
288 ml/min ストップコックを外し直接接続した場合
272 ml/min ストップコックを付けて使用した場合
内臓動脈での使用に最適のように、設計されています。

プルット スモール オクルージョン・カテーテル

この柔らかく柔軟なバルーンカテーテルは小血管用で、クランプや結束なしで血管に外傷を与えない血流遮断が行えます。これは動脈瘤手術中、脛骨動脈、膝窩動脈、腰椎動脈、腹腔動脈等を含む小血管において静脈及び動脈からの出血を制御するのに最適です。

小さなバルーンは小さな切開創でも速やかに挿入が可能
狭い術野の展開に、細いカテーテルは視野を邪魔せず使用可能